


Histotechnologies



pfm

pfm Safety Trimming Board Complete

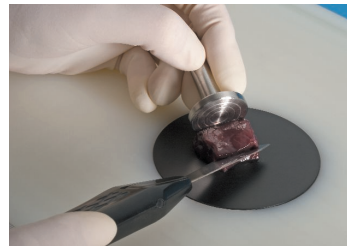

Das neuentwickelte pfm Safety Trimming Board Complete ermöglicht sicheres, schnelles und vereinfachtes Zuschneiden.

Über integrierte Trimmeinsätze aus hochwertigem Edelstahl mit unterschiedlichen Tiefenmaßen können vordefinierte Schnittdicken schnell und einfach umgesetzt werden (1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,8 mm).

Ein weiterer Trimmeinsatz dient ebenfalls dem vordefinierten Zuschneiden und kann eine Einbettkassette aufnehmen, um die Probe bereits in der Kassette auf entsprechende Höhe zu schneiden.

Die Ränder der Trimmeinsätze sind gleichzeitig zur Auflage und Führung der eingesetzten Schneideinstrumente geeignet.

Mit zwei im Durchmesser unterschiedlichen Halteadaptoren können die Proben entsprechend in den Trimmeinsätzen fixiert werden.

Ein herausnehmbarer Trimmingadapter aus schwarzem Kunststoff dient als Schneidezentrum und eignet sich hervorragend als Auflage für kleinere farblose Gewebeproben.

Im vorderen Bereich des pfm Safety Trimming Boards wurde ein Maßstab direkt hinter den Trimmeinsätzen angebracht und ermöglicht ein unkompliziertes Vermessen der Proben.

Die umlaufende Ablaufrinne wird durch mehrere Abflußöffnungen unterbrochen und ermöglicht den ständigen Ablauf von Flüssigkeiten.

Das separate Tool Board ermöglicht eine perfekte, einfache und sichere Aufbewahrung weiterer FEATHER Zuschneideinstrumente.



| pfm Safety Trimming Board Complete* | | | | | |
|---|--------|--------|-------|------------|-------|
| REF | Breite | Tiefe | Höhe | Material | VPE |
| 040600 | 583 mm | 350 mm | 35 mm | Kunststoff | 1 St. |
| Lieferumfang: pfm Safety Trimming Board und pfm Safety Tool Board Set | | | | | |
| pfm Safety Trimming Board | | | | | |
| REF | Breite | Tiefe | Höhe | Material | VPE |
| 040300 | 420 mm | 350 mm | 35 mm | Kunststoff | 1 St. |
| pfm Safety Tool Board | | | | | |
| REF | Breite | Tiefe | Höhe | Material | VPE |
| 040400 | 163 mm | 350 mm | 35 mm | Kunststoff | 1 St. |
| pfm Safety Tool Board Set* | | | | | |
| REF | Breite | Tiefe | Höhe | Material | VPE |
| 040500 | 163 mm | 350 mm | 35 mm | Kunststoff | 1 St. |
| * Lieferumfang: 1 Seziergriff F-60 REF 205600000, 1 Schere Nr. 145 REF 208000055, 1 Trimming Griff F-80P REF 205550001, 1 Trimming Griff F-130P REF 205530001, 1 Trimming Griff F-80 mini REF 205570000 | | | | | |



Zertifiziert nach: ISO 13485 : 2003

pfm · Produkte für die Medizin AG
Wankelstraße 60
50996 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2236 9641-0
Fax +49 (0) 2236 9641-20
customerservice@pfm-ag.de
www.pfm-ag.de

PSD015/09.2007-01/1000/0as