



pfm Slide 2002 – Schlittenmikrotom

Eigenschaften

- ▶ Spiel- und wartungsfreie Kreuzrollenführung
- ▶ Mikrometerwerk geschützt im geschlossenen Gehäuse
- ▶ Kurzer horizontaler Arbeitshub
- ▶ Messerschlitten Arretierung in 2 Positionen
- ▶ Einfache Freiwinkelverstellung am drehbaren Messerhalter ohne Lösen der Messerklemmung
- ▶ Universal Kassettenklammer oder Standard Objektklammer
- ▶ Abnehmbarer Fingerschutz
- ▶ Schnittabfallwanne
- ▶ Kompakte Form mit ergonomischem Design
- ▶ Einfach zu reinigen

Technische Daten

REF: 020011

Lieferumfang:

Messerhalter

Fingerschutz mit Magnethalterung

Universal Kassettenklammer, nicht orientierbar

Schnittabfallwanne

- ▶ Schnittdicke: 1 - 30 μm
- ▶ Auflösung: von 1 μm – 10 μm in 1 μm Schritten
von 10 μm - 30 μm in 5 μm Schritten
- ▶ Schneidebewegung: manuell
- ▶ Grobtrieb: manuell über das Handrad für die Grobzustellung

- ▶ Abmessungen (B/T/H): 260 x 220 x 300 mm
- ▶ Horizontalhub: 90 mm
- ▶ Vertikalhub: 30 mm
- ▶ Gewicht: 12 kg

Schnittabfallwanne


Universal Kassettenklammer

Schnittdickeneinstellung

Handrad für Grobzustellung

pfm Slide 2002

Schlittenmikrotom

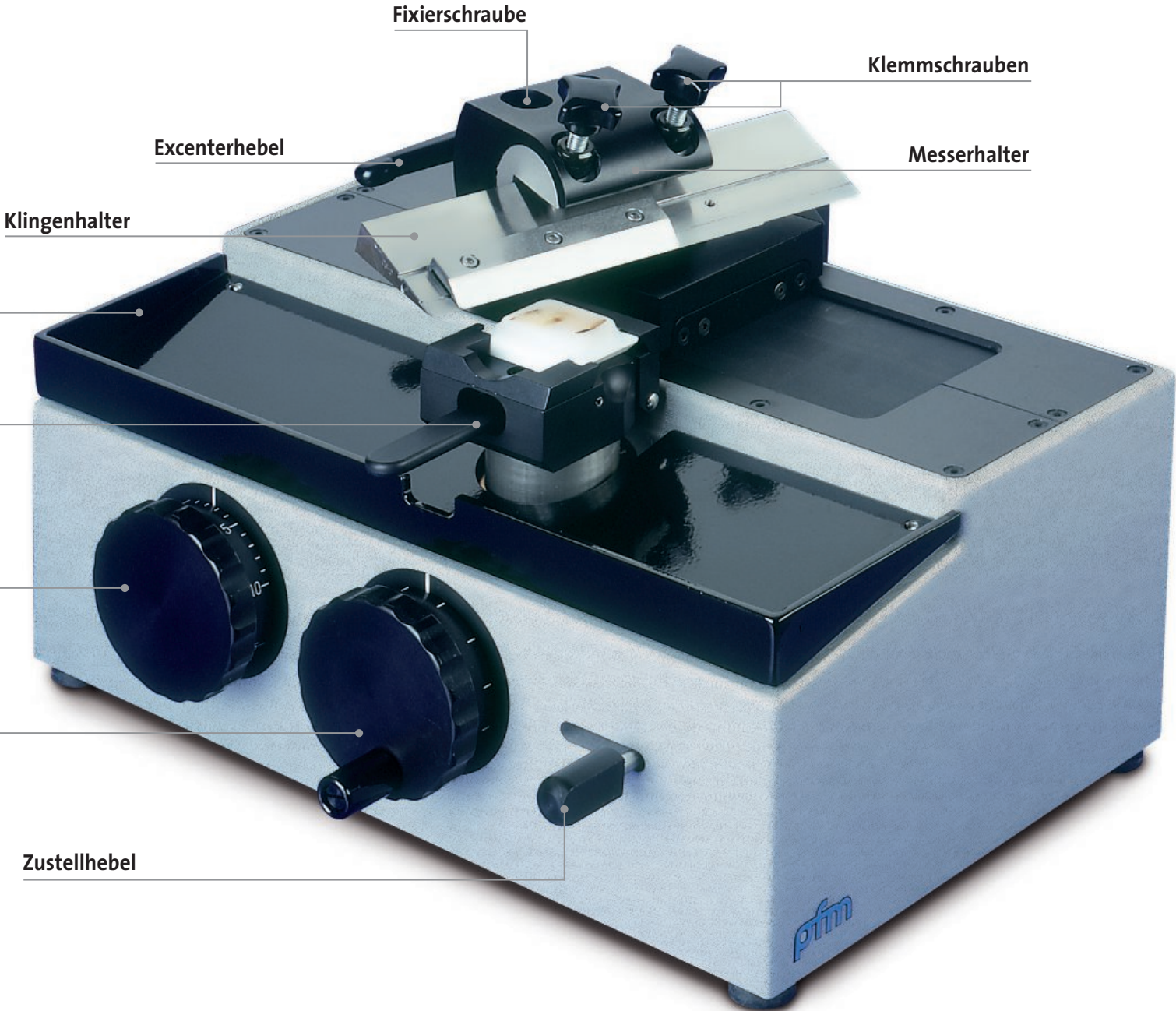

Fixierschraube

Klemmschrauben

Excenterhebel

Messerhalter

Klinghalter

Zustellhebel

pfm



Universal Kassettenklammer
nicht orientierbar
REF 101108




Fingerschutz
mit Magnethalterung
REF 010007



Standard Objektklammer
nicht orientierbar
max. Probengröße 40 x 45 mm
REF 010004



Schnittabfallwanne
REF 010006

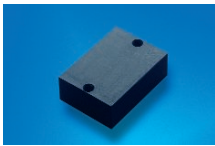

Adapter
REF 010015



Distanzstück
REF 010005



Messerhalter
REF 010002